

Акушерский симулятор Obstetric Susie



Артикулы: 1013558

Назначение

Этот универсальный акушерский манекен разработан специально для тренировки навыков акушерства и действий при осложненных родах.

Особенности

- В акушерском тренажере имеется надувная подушка для выполнения маневра Леопольда
- Адаптивный родовой канал для демонстрации трудностей и их преодоления
- Имеются инструкции по применению, идущая в комплекте, позволит сделать практику более эффективной

Тренируемые навыки

- Моделирование родов с обычным положением плода или тазовым предлежанием
- Возможность демонстрации внутреннего поворота, изгнания и внешнего поворота
- Маневр Леопольда
- Тренировка внутриматочных манипуляций для перевода плода с тазовым или поперечным предлежанием в теменное

Для выполнения маневра Леопольда используется пальпация, которая позволяет определить положение плода - теменное, поперечное или тазовое предлежание. При этом нижняя подушка служит для приподнятия плода во время пальпации. Мягкая желудочная оболочка также способствует более легкой пальпации или манипуляции с плодом.

При родах в тазовом предлежании или при необходимости использования вакуумного экстрактора происходит изменение положения плода в механизме для родов. Для перевода плода из тазового предлежания в нормальное положение используется маневр Пинарда или «поворот на ножку». Иногда для выполнения вакуумной экстракции необходимо приостановить нормальные роды.


После родов на акушерском тренажере проводятся мероприятия: например, массаж дна матки, который помогает формированию «тела» матки. Также используются модули для проведения медицинской эпизиотомии в случае разрывов малых половых губ, медиолатеральных разрывов и стандартной медиолатеральной эпизиотомии.

Артикул	1000002	1005790	1022879	1013558	1019303
Плод	Плод с родничками и швами черепа	Плод мужского и женского пола с подвижными суставами	Плод мужского пола с подвижными суставами и родничками на голове	Плод с подвижными суставами	Плод с подвижными суставами
Пальпация родничков на голове	+	+	+	+	+
Прослушиваемые тоны сердца роженицы и плода	—	—	—	—	+
Механизм родов	Вручную	Вручную	Вручную	Вручную	Авто
Полное, чистое и неполное ягодичное предлежание плода	+	+	+	+	+
Роды путем кесарева сечения	—	+	+	+	+
Роды при полном и неполном предлежании плаценты	Только полное	Только полное	+	Только полное	Только полное
Искусственный разрыв плодных оболочек (AROM)	—	—	+	—	—
Внутриматочные манипуляции	—	+	+	+	+

Выпадение пуповины и предлежание плаценты	+	+	+	+	+
Ритгена	—	+	+	+	—
Леопольда	+	+	+	+	+
Пинарда и Прагьи (ягодичное предлежание)	—	+	+	+	+
Морисо-Смелли-Вейта (ягодичное предлежание)	—	—	+	+	+
Рубина и Вудса (дистоция плечиков)	—	—	+	+	+
Эпизиотомия	—	+	При использовании дополнительно приобретаемого модуля 10 22212	+	—
Массаж дна матки	—	+	—	+	+
Рыхлая матка	—	—	—	+	+
Послеродовое кровотечение	—	—	При использовании дополнительно приобретаемого модуля 10 21567	—	+
Наложение зажима и перерезание пуповины	—	—	—	+	+


Комплект поставки

- Тренажер
- Накладки на брюшную стенку
- Трехмерные шейки матки
- Вставки наружных половых органов у женщин
- Подвижная новорожденная кукла
- Плаценты, пуповины
- Вставка для эпизиотомии
- Матка после родов
- Подушка для подъема
- Силиконовый лубрикант
- Тальковый порошок
- Инструкция по применению
- Футболка и подгузники
- Сумка для переноски

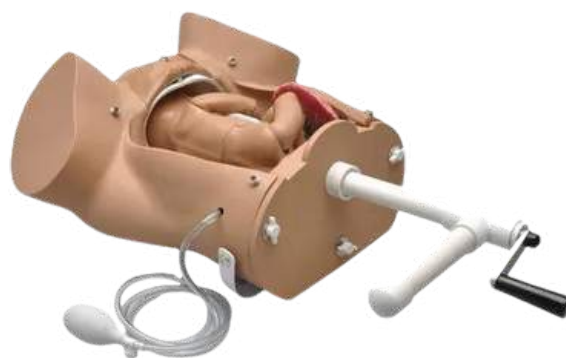

Вес, кг
11.9

Дополнительные фотографии

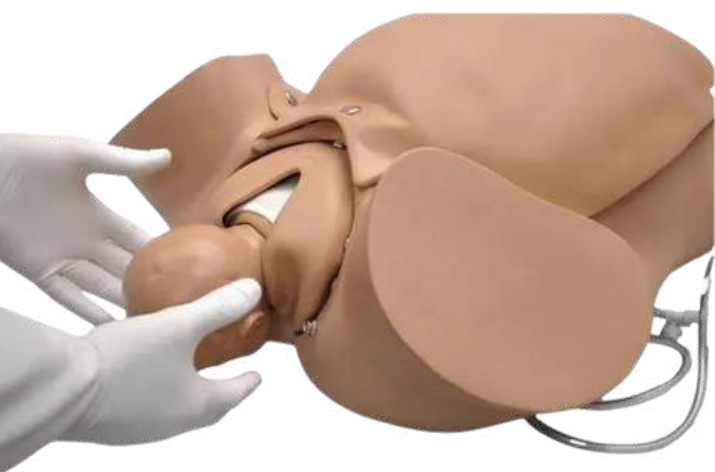

Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru