

Полный манекен Child CRiSiS



Артикулы: 1021994

Данный медицинский манекен-тренажер работает как реанимационный комплекс и предназначен для обучения отдельных людей или групп способам оказания неотложной помощи детям. Он предоставляет все средства обеспечения обучения педиатрическим специализированным реанимационным мероприятиям (PALS) и объединяет все станции отработки навыков на одном манекене, делая обучение более реалистичным и предоставляя обучающимся возможность правильного восприятия меньшего по размеру пациента. Имитирует 5-летнего ребенка.

Манекен позволяет отрабатывать аспирацию, внутрикостные/внутривенные инъекции, СЛР, дефибрилляцию сердца и замер давления. Имеет все необходимые анатомические ориентиры, обладая подвижными шеей и челюстью.

Анатомические ориентиры

- коленная чашечка
- большеберцовая кость
- бугристость большеберцовой кости
- лучевая и сонная артерии
- лонное сочленение
- передняя и верхняя подвздошные кости

В рамках использования медицинского манекена человека реализованы аспирация жидкости и обратный вброс крови из венозной системы под давлением. Предусмотрены сменные кожа и кости, а также прощупываемый пульс.

Рука для ввода инъекций в вену обладает подвижным соединением в месте двуглавой мышцы для обеспечения доступа спереди от локтевого сустава и с тыльной стороны

Размер

1180 мм

Вес, кг


11.919

Аспирация	Рука для замера давления	Грудная клетка для дефибрилляции сердца
<p>В совместимые устройства для обеспечения проходимости дыхательных путей входят E.T., E.O.A., E.T.L., L.M.A., E.G.T.A., Combitube® и ларингеальная трубкаНадуваемая полость желудка для индикации зондирования пищеводаСредства интубации через рот, нос и пальцевой интубацииОтдельные левое и правое легкое для аускультацииСредства аспирации</p>	<p>Зона молчанияСистолические и диастолические уровни, частота сердечных сокращений и сила тонаГромкоговоритель в руке воспроизводит реальные тоны артериального давления5 тонов Короткова</p>	<p>Совместим со всеми стандартными марками и типами дефибрилляторов, мониторов и имитаторов пациентаВнутреннее устройство нагрузки поглощает полную энергию электрического разрядаРучная, полуавтоматическая и автоматическая дефибрилляция сердцаРитмы сердца определяются на 4 позициях для снятия ЭКГ и 2 позициях дефибрилляции сердца</p>

Манекен можно использовать с надгортанными устройствами для прохождения дыхательных путей.

	1021993	1021994	1021995	1005624	1021996
Обеспечение проходимости дыхательных путей	+	+	+	+	+
Ларингоспазм и отек языка	+	—	+	—	+
Рука для измерения артериального давления	—	+	+	+	+
СЛР	+	+	+	+	+
Грудная клетка для проведения дефибрилляции сердца	—	+	+	+	+
Нога для осуществления бедренного доступа	—	+	+	+	+
Внутрикостная инфузия	—	+	+	+	+
Рука для внутривенных инъекций	—	+	+	+	+
Интерактивный имитатор ЭКГ	по заказу 1005666	по заказу 1005666	по заказу 1005666	в комплекте	в комплекте
Футляр для переноски	по заказу 1005651	по заказу 1005651	по заказу 1005651	по заказу 1005651	по заказу 1005651

Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
zakaz@feba.ru

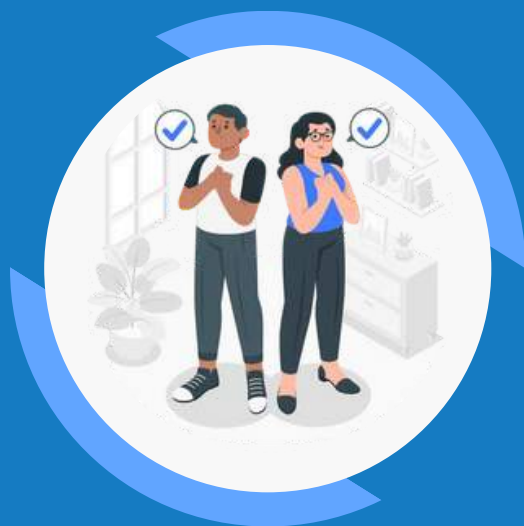

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 zakaz@feba.ru